

Lăsați sonda să vorbească de la sine...

... și să vă motiveze pacienții.

pa-on

Măsurători ușor de realizat, documentație și arhivare imediate.



Sonda parodontală mai inteligentă asigură

- **Măsurători automate și controlate.** Pe durata unei sondări, adâncimea pungii, pierderea fixării și retragerea gingiei sunt determinate automat și transmise sistemului de gestionare al cabinetului. Avantaje semnificative: nu necesită asistență suplimentară la pacient pentru a documenta rezultatele măsurătorii.
- **Complet integrat** în software-ul cabinetului. Măsurătorile sunt transferate direct în byzz Paro sau în software-ul de gestionare al cabinetului. Constatările sunt vizualizate imediat în graficul parodontal și pot fi folosite cu ușurință pentru a fi comunicate pacientului.




Ușurarea identificării stadiului bolii parodontale.

Identificarea stadiului bolii parodontale face parte din constatările regulate care vizează pacientul și continuă să fie monitorizat tot mai mult deseori în rutina igienei dentare. Puteți recunoaște bolile parodontale încă din faza lor timpurie și le puteți minimiza riscurile. Pa-on simplifică și standardizează înregistrarea stadiului bolii parodontale. Rezultatele măsurătorilor sunt vizibile imediat în graficul parodontal.

- **Măsurători standardizate.** Vârful steril de unică folosință este calibrat pentru a aplica o forță standardizată de 20 g (0,2N). Aceasta asigură rezultate precise, standardizate și utilizabile imediat- chiar între operatori diferiți. De obicei pacienții percep măsurătorile efectuate cu pa-on ca fiind mai puțin dureroase în comparație cu o sondă metalică obișnuită.
- **Procedura de efectuare a măsurătorilor este cea uzuală.** Toate procedurile uzuale de efectuare a măsurătorilor pot fi setate prin intermediul software-ului, de ex. numărul măsurătorilor, punctele per dinte, adâncirea, indicele de sângerare-astfel încât cabinetul să nu fie nevoit să își modifice procedurile obișnuite.



Economisirea timpului

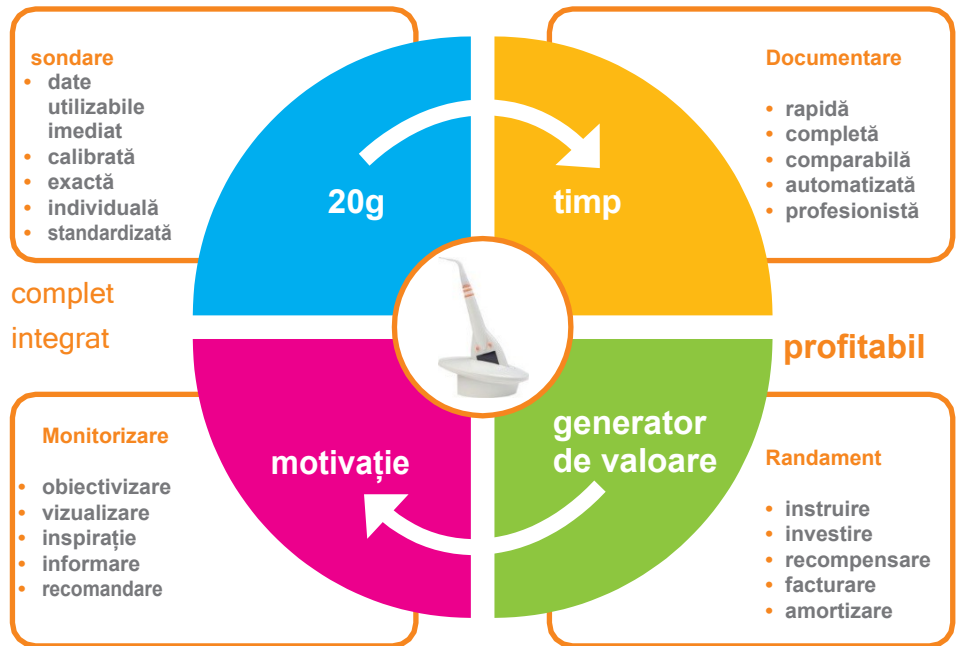

CALIBRARE RAPIDĂ ÎNTR-UN SINGUR PAS

Înainte de a iniția procedura de măsurare, vârful de măsurare trebuie adus în poziția zero - apăsați pe el o singură dată. Sonda confirmă printr-un sunet scurt și este gata de utilizat.

PROCEDURA INDIVIDUALĂ DE MĂSURARE

Puteți seta procedura de măsurare dorită individual cu ajutorul software-ului [secvența de măsurare/numărul de puncte de măsurare/etc.]

ERGONOMIC ȘI WIRELESS

Mulțumită dispozitivului ușor complet automat, valorile măsurate cu precizie sunt salvate automat și transferate către monitorul dvs.

UȘOR DE UTILIZAT

Măsurătorile efective sunt efectuate chiar de sondă. Informații suplimentare, precum indicele de sângerare, pot fi înregistrate direct împreună cu măsurătorile, folosind butoanele de înregistrare.



ÎNTOTDEAUNA ACTUALIZAT ȘI PREGĂTIT DE UTILIZARE

Când este pus la încărcat în stația proprie, toate măsurătorile sunt transferate în byzz Paro și/sau în software-ul de gestionare al cabinetului.

VÂRF STERIL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

Măsurare calibrată, fără durere, cu aplicarea unei forțe de exact 20g [0,2N]

Păstrarea clienților

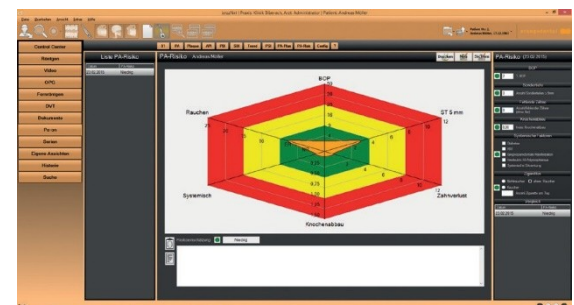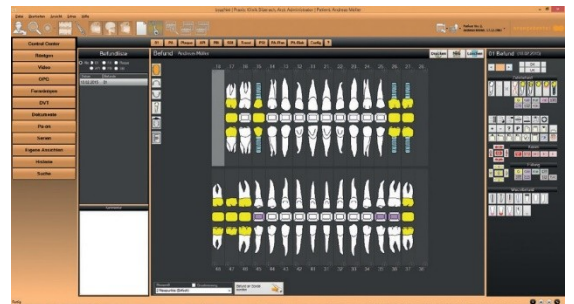

- Software byzz@Paro

AFIȘAJ/ FEEDBACK

Feedback optic și acustic.

